

ADQUISICIÓN DE DATOS

CS 3600

El escaneado intraoral en tu clínica

IMAGEN

Imágenes 3D Full HD muy precisas. Colores y texturas más brillantes. Escaneados HD 3D en colores que corresponden de manera óptima a la realidad.

FACILIDAD DE USO

Previene la contaminación cruzada cambiando modalidad directamente del escáner.



SOFTWARE CS SCANFLOW

El software garantiza prestaciones elevadas en la fase de adquisición del escaneado, por un flujo de trabajo rápido e intuitivo.





sweden & martina

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El escáner intraoral CS3600 de Carestream Dental les ofrece un escaneado más avanzado, para cualquiera tipología de casos (protésicos, ortodóncicos o de implantes). Con una adquisición de la impresión digital rápida, precisa y fácil, tanto usted como sus pacientes aprovecharán de la planificación del tratamiento mejorada y de un flujo de trabajo rápido y linear.

La precisión es la combinación de dos elementos importantes y complementarios: esmero y exactitud. El esmero se refiere a la cantidad efectiva que se mide, mientras que la exactitud se refiere a la capacidad de repetir la medición con resultados estables. Gracias a su arquitectura de sistema abierto, el CS 3600 funciona con cualquier software CAD que acepte archivos STL.

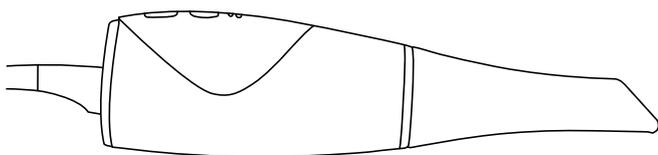

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Iluminación: LED, ámbar, azul, verde

Campo visual: 13 mm x 13 mm (puntal normal)

Profundidad de campo: Da -2 mm a +12 mm

Dimensión de la pieza de mano: 220 x 38 x 58 mm
(con puntal normal o lateral)

