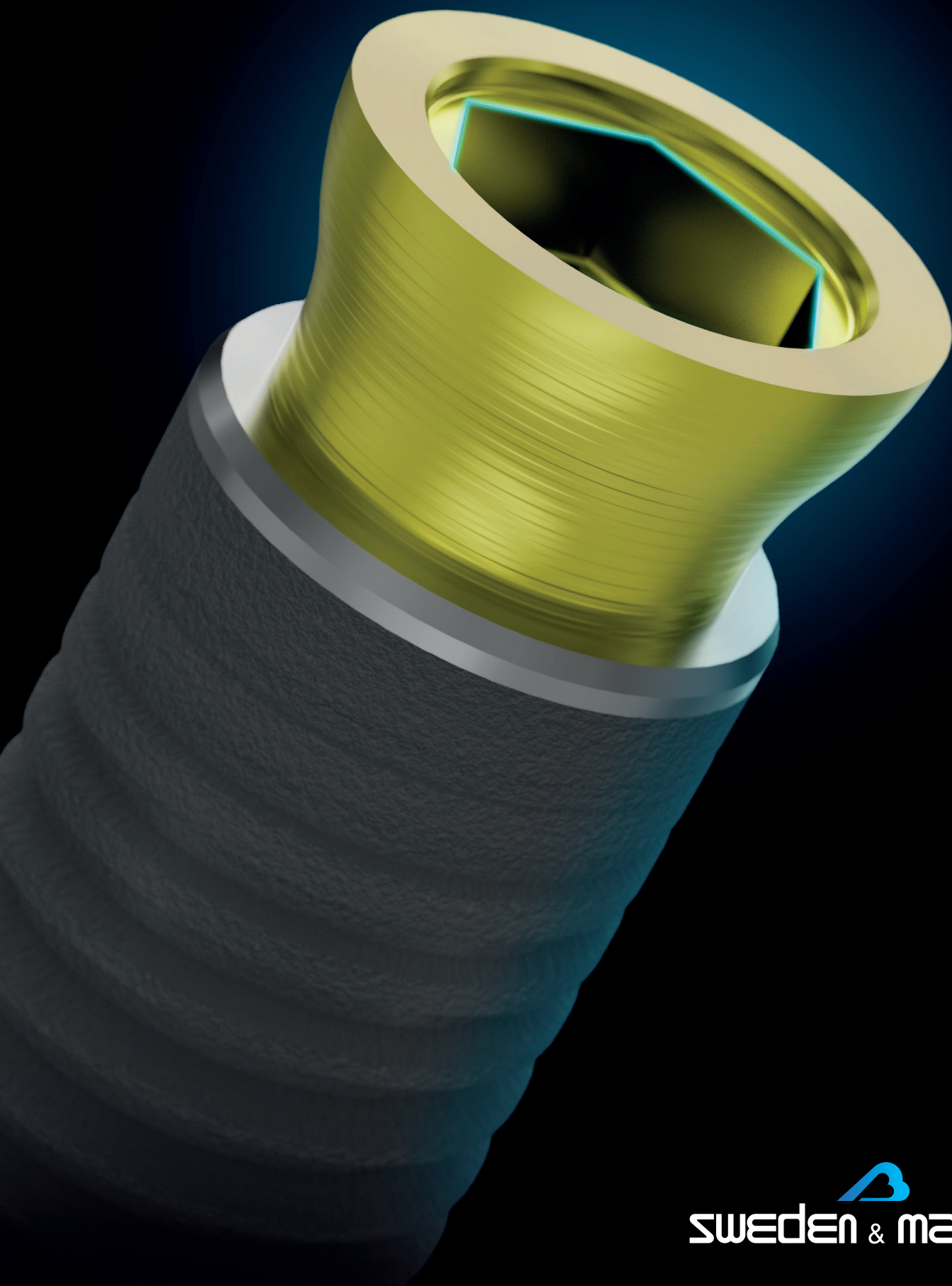


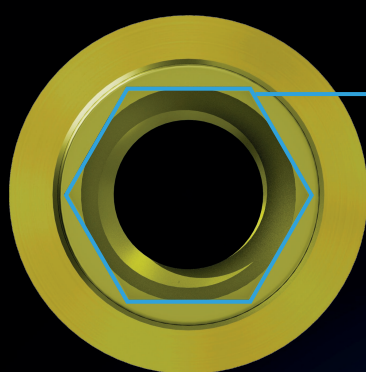
Abutment SC

per impianti CSR

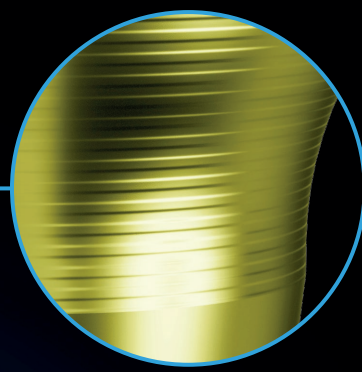


Abutment SC per impianti CSR

Progettato per realizzare corone singole, preservando i tessuti molli e semplificando la riabilitazione protesica



Connessione esagonale per il posizionamento della corona



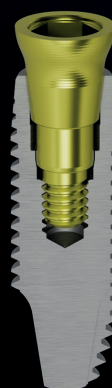
Superficie UTM

La superficie UTM è caratterizzata da una **microspira regolare** che orienta il movimento dei fibroblasti, favorendo l'accelerazione del processo di guarigione e il mantenimento nel tempo di tessuti molli peri-implantari stabili e sani.

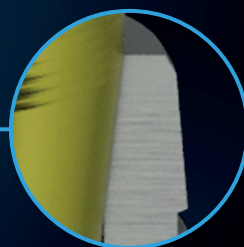


Vite M2.0

La vite protesica da 2.00 mm offre una resistenza meccanica superiore, progettata per affrontare anche i carichi più elevati senza compromessi.



Un'unica piattaforma protesica per entrambe le connessioni implantari per un approccio semplificato.

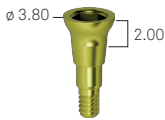
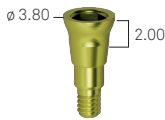
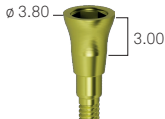
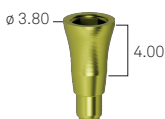
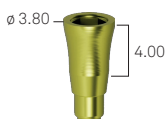


L'accoppiamento conometrico e l'assenza di una vite passante garantiscono un **sigillo sicuro e affidabile** contro l'infiltrato batterico.

L'abutment viene fornito insieme al trasportatore.

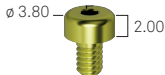
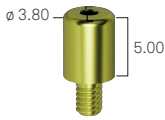
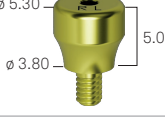
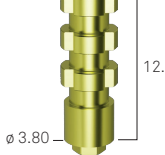
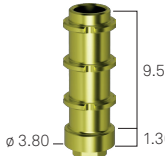


Abutment SC

h mm	Connessione DAT-N		Connessione DAT	
2.00 mm		VSR-PLS-N-2-ROT		VSR-PLS-2-ROT
3.00 mm		VSR-PLS-N-3-ROT		VSR-PLS-3-ROT
4.00 mm		VSR-PLS-N-4-ROT		VSR-PLS-4-ROT

Per il serraggio degli abutment utilizzare l'Easy Insert con anello azzurro, compreso nel kit CSR.
Il torque raccomandato per il serraggio è di 25-30 Ncm.

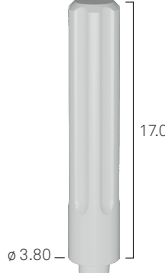
Componenti per sovrastrutture su abutment SC

dritta		PLS- CG
L - lunga, dritta		PLS- CG-L
L - lunga, divergente		PLS-CGR-L
transfer pick-up, emergenza dritta		PLS-TRA*
cannula in titanio, indicizzata		PLS-CT**

*Transfer pick-up: vite PLS-VTRA-200 inclusa.

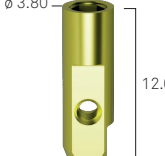
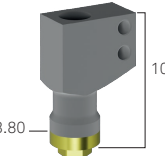
** Cannula in titanio: vite PLS-VM-200 inclusa.

Trasportatore

trasportatore manuale		PLS-AVV*
-----------------------	---	----------

*L'abutment viene fornito insieme al trasportatore.

Componenti SC per protesi digitale

analogo digitale per abutment SC		PLS-ANA-DIG*
scanbody digitale in titanio per abutment SC		PLS-INT-CAMTRA-L**

*Analogo digitale: vite VADIG-180 inclusa.

**Scanbody per abutment SC: vite PLS-VM-200 inclusa.

Vite per foro angolato

vite foro angolato		E-VMA-200*
--------------------	---	------------

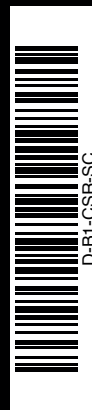
Nota bene: la vite per foro angolato va serrata tramite i cacciaviti dedicati DSPDCLH-24 e DSPDFCLH-32.

*Vite per foro angolato: da utilizzare in combinazione con soluzioni custom-made. Le librerie per EXOCAD e 3Shape sono scaricabili dal sito Digital Atelier.

Viti di ricambio standard

vite protesica		PLS-VM-200
		PLS-VM-200-10*
vite per transfer		PLS-VTRA-200

*La vite protesica è disponibile anche nella confezione da 10 pz.



rev. 07-26



Sweden & Martina S.p.A.
Via Veneto, 10
35020 Due Carrare (PD), Italy
Tel. +39.049.9124300
info@sweden-martina.com

www.sweden-martina.com

Sweden & Martina Ltd - United Kingdom
info.uk@sweden-martina.com
Sweden & Martina Inc. - Distributor for U.S.
info.us@sweden-martina.com
Sweden & Martina France Sarl - France
info.fr@sweden-martina.com

Sweden & Martina Mediterranea S.L. - España
info.es@sweden-martina.com
Sweden & Martina Lda - Portugal
info.pt@sweden-martina.com
Sweden Martina Romania srl - România
info.ro@sweden-martina.com

Gli impianti, le componenti protesiche e gli strumenti chirurgici presenti nella pubblicazione sono Dispositivi Medici e sono fabbricati da Sweden & Martina S.p.A. Gli articoli presenti sono conformi alle norme ISO 9001 e ISO 13485 e sono registrati con marchio CE in accordo con il Regolamento (UE) Dispositivi Medici n.2017/745. Lo stabilimento Sweden & Martina produce Dispositivi Medici in accordo alle cGMP vigenti in USA e in altri paesi del mondo.



Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili in tutti i mercati.

Tutti i marchi presenti nella pubblicazione sono proprietà di Sweden & Martina, con eccezione dei prodotti per i quali è diversamente indicato.

Questi prodotti sono destinati agli studi medici e ai laboratori, la loro vendita non è rivolta al paziente.

È vietato rivendere, duplicare o divulgare i prodotti contenuti nella presente pubblicazione senza il consenso scritto di Sweden & Martina S.p.A.

Per ulteriori informazioni sui prodotti, incluse indicazioni, controindicazioni, avvertenze, precauzioni e potenziali effetti collaterali, si faccia riferimento al sito web di Sweden & Martina S.p.A.

I contenuti sono aggiornati al momento della pubblicazione. Contattare l'azienda Sweden & Martina per gli aggiornamenti successivi.