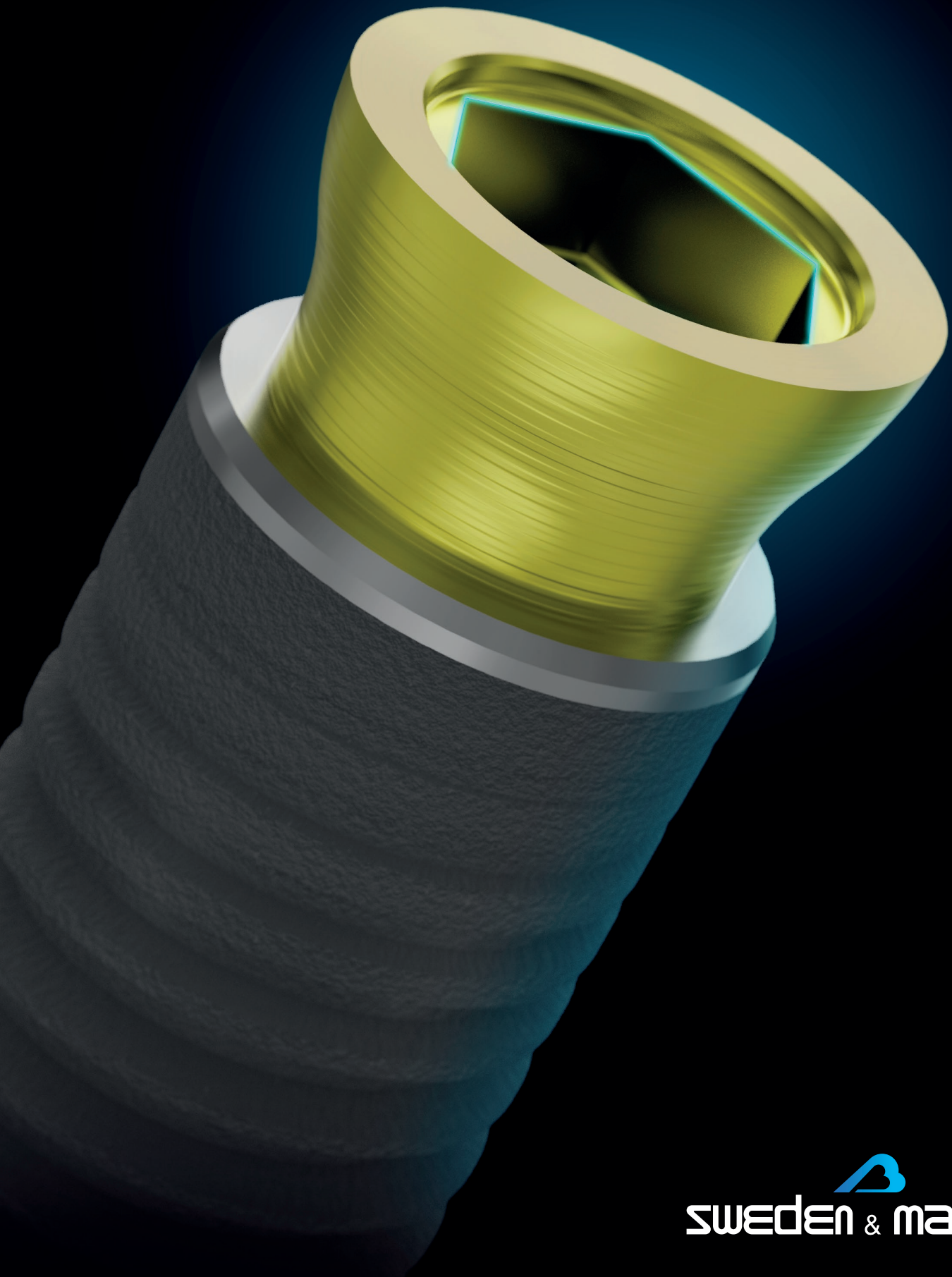


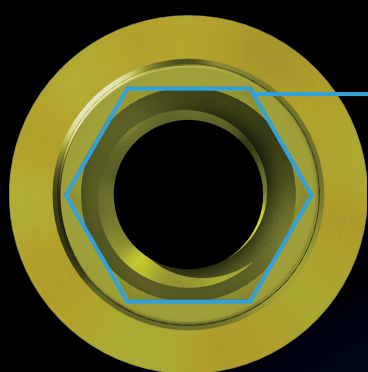
Abutment SC

para implantes CSR

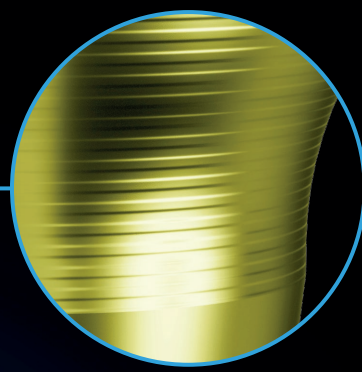


Abutment SC para implantes CSR

Diseñado para realizar coronas unitarias, preservando los tejidos blandos y simplificando la rehabilitación protésica



Conexión hexagonal para la colocación de la corona



Superficie UTM

La superficie UTM se caracteriza por una **microrosca regular** que orienta el movimiento de los fibroblastos, favoreciendo la aceleración del proceso de cicatrización y el mantenimiento a largo plazo de tejidos blandos periimplantarios estables y sanos.



Tornillo M2.0

El tornillo protésico de 2.0 ofrece una resistencia mecánica superior, diseñada para soportar incluso las cargas más elevadas sin renunciar a nada.



Una única plataforma protésica para ambas conexiones de implante, lo que simplifica el procedimiento.

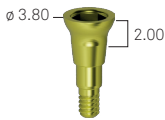
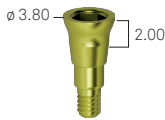
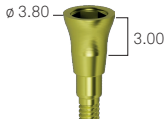
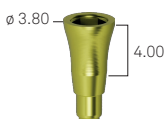
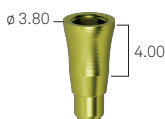


El acoplamiento conométrico y la ausencia de un tornillo de fijación garantizan un **sello seguro y fiable** contra el infiltrado bacteriano.

El pilar se suministra junto con el estuche de transporte.

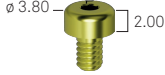
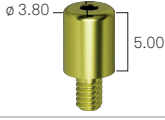
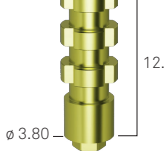
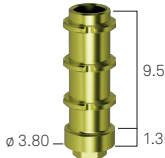


Abutment SC

h mm	Conexión DAT-N		Conexión DAT	
2.00 mm		VSR-PLS-N-2-ROT		VSR-PLS-2-ROT
3.00 mm		VSR-PLS-N-3-ROT		VSR-PLS-3-ROT
4.00 mm		VSR-PLS-N-4-ROT		VSR-PLS-4-ROT

Para apretar los pilares, utiliza el Easy Insert con el anillo azul, incluido en el kit CSR.
El torque de fijación recomendado es de 25-30 Ncm.

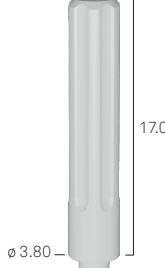
Componentes para superestructuras sobre abutment SC

recto		PLS-CG
L - larga, recta		PLS-CG-L
L - larga, divergente		PLS-CGR-L
transfer pick up, emergencia recta		PLS-TRA*
cánula de titanio, indexada		PLS-CT**

*Transfer pick up: tornillo PLS-VTRA-200 incluido.

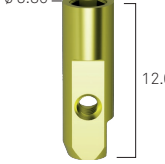
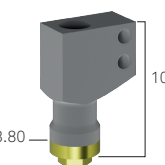
**Cánula de titanio: tornillo PLS-VM-200 incluido.

Transportador

transportador manual		PLS-AVV*
----------------------	---	----------

*El pilar se suministra junto con el transportador.

Componentes SC para prótesis digitales

análogo digital para Abutment SC		PLS-ANA-DIG*
Cuerpo de escaneo digital de titanio para Abutment SC		PLS-INT-CAMTRA-L**

*Análogo digital: tornillo VADIG-180 incluido.

**Cuerpo de escaneo para abutment SC: tornillo PLS-VM-200 incluido.

Tornillo para orificio angulado

tornillo para orificio angulado		E-VMA-200*
---------------------------------	---	------------

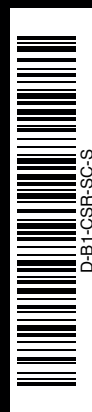
Nota importante: el tornillo para orificio angulado debe apretarse con los destornilladores específicos DSPDCLH-24 y DSPDFCLH-32.

*Tornillo para orificio en ángulo: debe utilizarse en combinación con soluciones a medida. Las bibliotecas para EXOCAD y 3Shape se pueden descargar desde la página web de Digital Atelier.

Tornillos de repuesto estándar

tornillo protésico		PLS-VM-200
		PLS-VM-200-10*
tornillo para transfer		PLS-VTRA-200

*El tornillo protésico también está disponible en envases de 10 unidades.



rev. 07-26



Sweden & Martina S.p.A.

Via Veneto, 10
35020 Due Carrare (PD), Italy
Tel. +39.049.9124300
info@sweden-martina.com

www.sweden-martina.com

Sweden & Martina Mediterranea S.L.

Avenida de la Industria, 4
Parque Empresarial Natea Business Park
Edificio 0, Portal 2, Oficina Bajo C
28108 Alcobendas, Madrid
Tél: 963525895 - 900535617
info.es@sweden-martina.com

Sweden & Martina Lda

Av. Miguel Bombarda, 35
1050-161 Lisboa, Portugal
Tel. +351 210509559
info.pt@sweden-martina.com

Sweden & Martina Ltd - United Kingdom

info.uk@sweden-martina.com
Sweden & Martina Inc. - Distributor for U.S.
info.us@sweden-martina.com
Sweden & Martina France Sarl - France
info.fr@sweden-martina.com

Gli impianti, le componenti protesiche e gli strumenti chirurgici presenti nella pubblicazione sono Dispositivi Medici e sono fabbricati da Sweden & Martina S.p.A.
Gli articoli presenti sono conformi alle norme ISO 9001 e ISO 13485 e sono registrati con marchio CE in accordo con il Regolamento (UE) Dispositivi Medici n.2017/745.
Sweden & Martina fabrica productos sanitarios de conformidad con las buenas prácticas de fabricación actuales (cGMP) vigentes en EE. UU. y en otros países del mundo.



Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili in tutti i mercati.

Tutti i marchi presenti nella pubblicazione sono proprietà di Sweden & Martina, con eccezione dei prodotti per i quali è diversamente indicato.

Questi prodotti sono destinati agli studi medici e ai laboratori, la loro vendita non è rivolta al paziente.

Está prohibido vender, duplicar o divulgar los productos contenidos en este catálogo sin el consentimiento escrito de Sweden & Martina S.p.A.

Per ulteriori informazioni sui prodotti, incluse indicazioni, controindicazioni, avvertenze, precauzioni e potenziali effetti collaterali, si faccia riferimento al sito web di Sweden & Martina S.p.A.

I contenuti sono aggiornati al momento della pubblicazione. Contactar con la empresa Sweden & Martina S.p.A., para las actualizaciones siguientes.