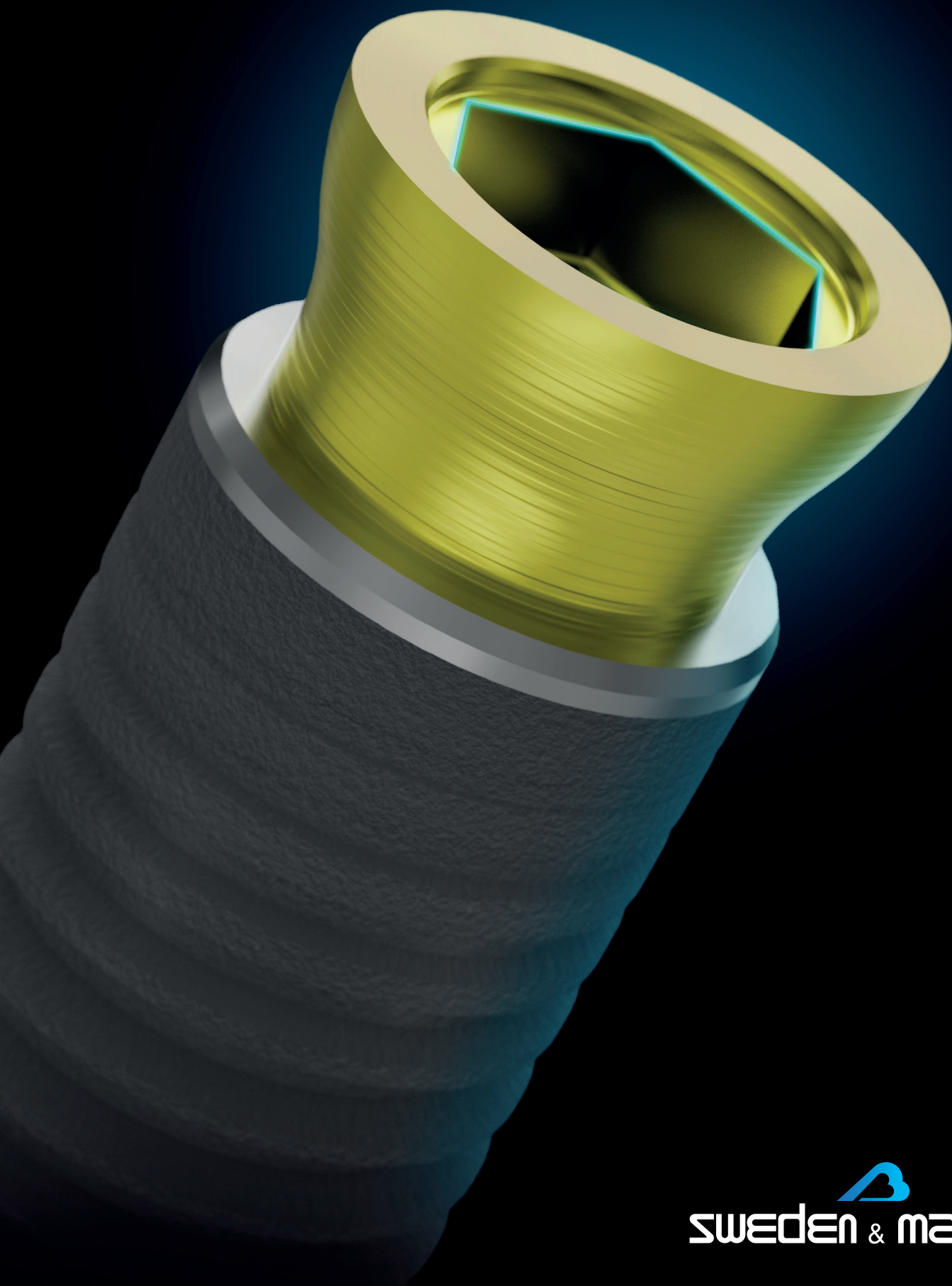


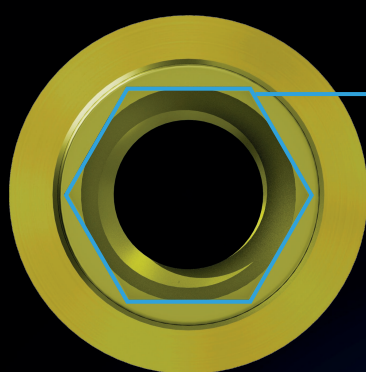
Abutment SC

pentru implanturi CSR

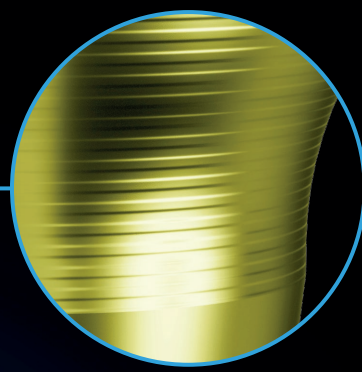


Abutment SC pentru implanturi CSR

Proiectat pentru realizarea coroanelor individuale, protejând țesuturile moi și simplificând reabilitarea protetică



Conexiune hexagonală pentru poziționarea coroanei



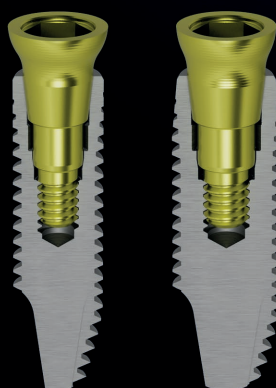
Suprafața UTM

Suprafața UTM este caracterizată de o **microspiră regulată** care orientează mișcarea fibroblastei, favorizând accelerarea procesului de vindecare și menținerea pe termen lung a țesuturilor moi periimplantare stabile și sănătoase.

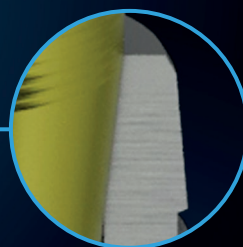


Șurub M2.0

Șurubul protetic de 2,00 mm oferă o rezistență mecanică superioară, fiind conceput pentru a face față chiar și celor mai mari sarcini fără compromisuri.



O singură platformă protetică pentru ambele conexiuni implantare, pentru o abordare simplificată.

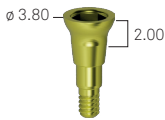
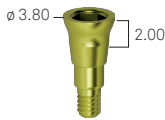
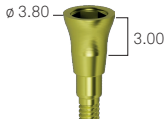
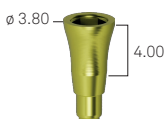
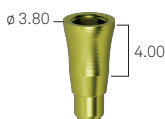


Cuplajul conometric și absența unui șurub de trecere garantează o **etanșare sigură și fiabilă** împotriva infiltrării bacteriene.

Abutmentul este livrat împreună cu transportorul.

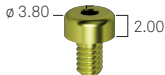
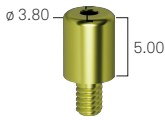
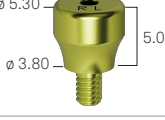
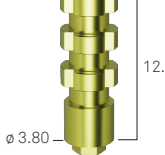
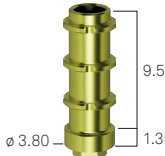


Abutment SC

h mm	Conexiune DAT-N		Conexiune DAT	
2.00 mm		VSR-PLS-N-2-ROT		VSR-PLS-2-ROT
3.00 mm		VSR-PLS-N-3-ROT		VSR-PLS-3-ROT
4.00 mm		VSR-PLS-N-4-ROT		VSR-PLS-4-ROT

Pentru a strânge bonturile, utilizați dispozitivul Easy Insert cu inel albastru, inclus în kitul CSR.
Cuplul recomandat pentru strângere este de 25-30 Ncm.

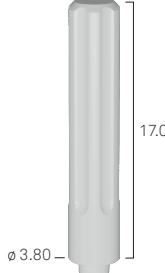
Componente pentru suprastructuri pe bonturile SC

drept		PLS-CG
L – lung, drept		PLS-CG-L
L - lung, divergent		PLS-CGR-L
transfer pick-up, ieșire dreaptă		PLS-TRA*
canulă din titan, indexată		PLS-CT**

*Pick-up de transfer: șurub PLS-VTRA-200 inclus.

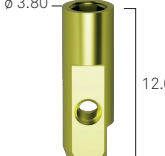
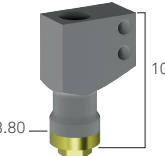
** Canulă din titan: șurub PLS-VM-200 inclus.

Transportor

transportor manual		PLS-AVV*
--------------------	---	----------

*Abutmentul este livrat împreună cu transportorul.

Componente SC pentru proteze digitale

analog digital pentru Abutment SC		PLS-ANA-DIG*
corp de scanare digital din titan pentru Abutment SC		PLS-INT-CAMTRA-L**

*Analog digital: șurub VADIG-180 inclus.

**Corp de scanare pentru abutmentul SC: șurub PLS-VM-200 inclus.

Șurub pentru orificiu înclinat

șurub pentru orificiu înclinat		E-VMA-200*
--------------------------------	---	------------

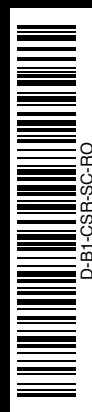
Atenție: șurubul pentru orificiu înclinat trebuie strâns cu ajutorul cheilor speciale DSPDCLH-24 și DSPDFCLH-32.

*Șurub pentru orificiu înclinat: se utilizează în combinație cu soluții personalizate. Bibliotecile pentru EXOCAD și 3Shape pot fi descărcate de pe site-ul Digital Atelier.

Șuruburi de schimb standard

șurub protetic		PLS-VM-200
		PLS-VM-200-10*
șurub pentru transfer		PLS-VTRA-200

*Șurubul protetic este disponibil și în ambalaj de 10 buc.



rev. 07-26



Sweden & Martina S.p.A.

Via Veneto, 10
35020 Due Carrare (PD), Italy
Tel. +39.049.9124300
info@sweden-martina.com
www.sweden-martina.com

Sweden Martina Romania srl

Strada Wilhelm Filderman nr. 18 Sector 3
030866 București - România
Sediu: 0040 0374 96 88 55
info.ro@sweden-martina.com

Sweden & Martina Ltd - United Kingdom

info.uk@sweden-martina.com

Sweden & Martina Inc. - Distributor for U.S.

info.us@sweden-martina.com

Sweden & Martina Mediterranea S.L. - España

info.es@sweden-martina.com

Sweden & Martina Lda - Portugal

info.pt@sweden-martina.com

Sweden Martina France Sarl - France

info.fr@sweden-martina.com

Implanturile, componentele protetice și instrumentele chirurgicale prezente în această publicație sunt Dispozitive Medicale și sunt fabricate de Sweden & Martina S.p.A. Articolele prezente sunt conforme cu standardele ISO 9001 și ISO 13485 și sunt înregistrate cu marcă CE în conformitate cu Regulamentul (UE) Dispozitive Medicale nr.2017/745. Fabrica Sweden & Martina produce Dispozitive Medicale în conformitate cu cGMP-urile în vigoare în SUA și în alte țări din lume.



Este posibil ca unele produse să nu fie disponibile pe toate piețele.

Toate mărcile comerciale din publicație sunt proprietatea Sweden & Martina, cu excepția produselor pentru care este indicat altfel. Aceste produse sunt destinate cabinetelor medicale și laboratoarelor, vânzarea lor nu se adresează pacientului.

Este interzisă revinderea, duplicarea sau distribuirea produselor conținute în această publicație fără acordul scris al Sweden & Martina S.p.A.

Pentru mai multe informații despre produse, inclusiv indicații, contraindicații, avertismente, precauții și potențiale efecte secundare, vă rugăm să consultați site-ul web Sweden & Martina S.p.A. Conținutul este actualizat la momentul publicării. Vă rugăm să contactați Suedia și Martina pentru actualizări suplimentare.